

AV18 & C18 Serien

Blutschlauchsysteme für die Hämodialyse
(dampfsterilisiert)



Original NIKKISO Blutschlauchsysteme,
optimal an Ihre **DBB-EXA** angepasst

Vorteile der AV 18 Serie

- DEHP-frei
- Umweltfreundliche sichere Dampfsterilisation
- Geringes extrakorporales Blutvolumen
- Reduzierte Blut/Luftkontaktfläche
- Geringer Vorbereitungsaufwand
- Einsparung des Ablaufbeutels
- Automatisches Online Spülen, An- und Ablegen
in Verbindung mit der **D-FAS** Funktion
der DBB-EXA



AV18&C18 Serien

Dampfsterilisierte Blutschlauchsysteme


Die AV18 & C18 Serien sind an die D-FAS* Funktionen der NIKKISO DBB-EXA optimal angepasst, um eine größtmögliche Arbeitserleichterung zu erreichen.

Die originalen NIKKISO Blutschlauchsysteme bieten, durch höchstmögliche Qualitäts- und Fertigungsstandards, die bestmögliche Auflösung und Genauigkeit beim Einsatz der optischen Messverfahren für die Blutvolumenmessung und die Rezirkulationsratenmessung von Gefäßzugängen.

Die Kombination von DEHP-freiem PVC-Material und der prozessüberwachten Dampfsterilisation, gemäß EN ISO 17665 -1: 2006, ist die beste Wahl für Biokompatibilität und sichere Pyrogen-Freiheit.




* Dialysis Full Assist System

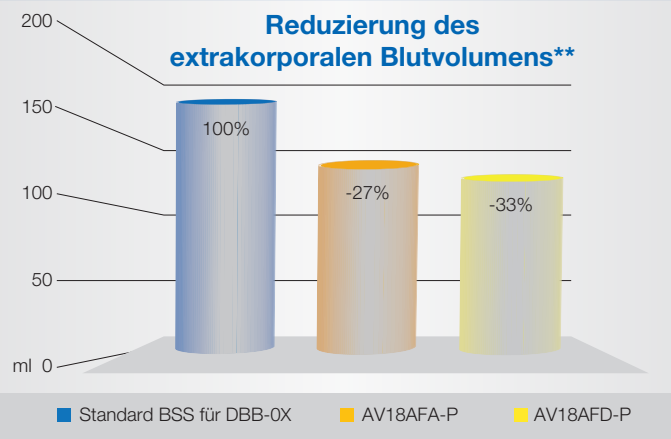

** basierend auf Herstellerangaben

Das verkleinerte extrakorporale Blutvolumen reduziert die Blut / Luftkontaktfläche.

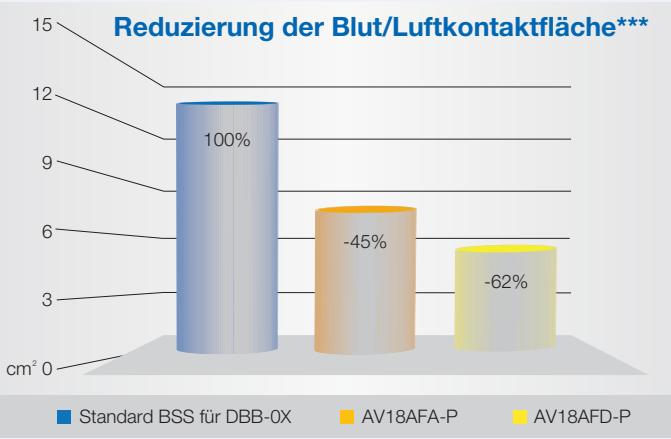

*** basierend auf arithmetischen Berechnungen

NIKKISO bietet eine breite Auswahl an Blutschlauchsystemen, die die Anforderungen des Pflegepersonals und die Gegebenheiten in den Dialysezentren berücksichtigen (z. B. AV18AFA-PL mit verlängerter Patientenleitung).

Das AV18AFA-P mit HDF Prä- und Postdilutionsanschlüssen kann für Online-HD, HF und HDF Behandlungen eingesetzt werden. Zusammen mit dem C18RFB-P (mit Luer-Lock) oder mit dem C18RFC-P (mit Luer-Lock und Anstechdorn) kann beim Spülen, An- und Ablegen, statt online aufbereiteter Spüllösung, Kochsalzlösung verwendet werden.


Online-HDF Set

Das praktische und ökonomische Set AV18AFA-HFP für die Online-HDF/Online HF Behandlung besteht aus einem Doppelnadel-System und der Substitutionsleitung C18AFA-P.

HD Set

Das AV18AFD-P ohne Dialysator-Eingangsdrukammer (mit kleinerer Blut / Luftkontaktfläche und reduziertem Füllvolumen) wurde speziell für Standard-HD Behandlungen entworfen.


Original NIKKISO Komponenten

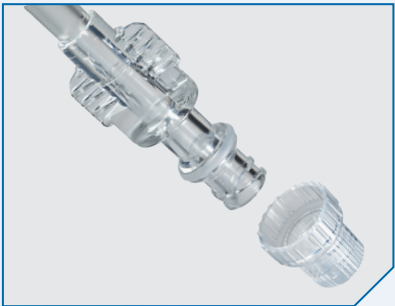


Online-Port-Konnektor, für eine sichere hygienische Konnektierung der Substitutleitung.



Druckableitfilter mit ergonomischem Gehäuse, für eine einfache und sichere Handhabung.

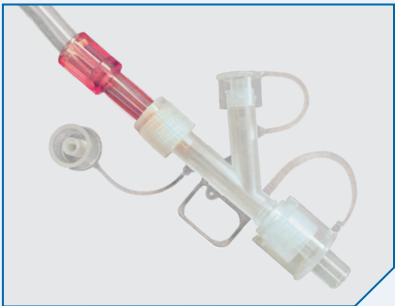

Y-Ansatzstück für D-FAS Spülen. Vollständig verschließbar und somit hygienisch zu handhaben.

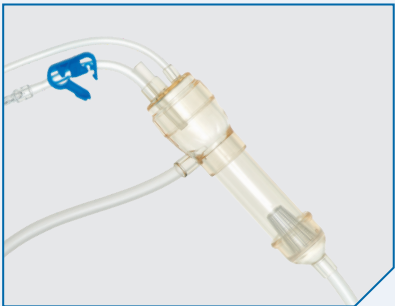

Flussoptimierte venöse Tropfkammer mit verbesserter Anströmung und höherer Luftabscheidung.

Sterilisationsverfahren
Dampfsterilisation (EN ISO 17665-1:2006)

Mindesthaltbarkeit
36 Monate

Therapieverfahren
HD, HF (Post/Prädilution), HDF (Post/Prädilution), Doppelnadel-Dialyse, Single-Needle-Dialyse

Blutschlauchsysteme			
Modell	Füllvolumen Blut (ml)	Beschreibung	VE
Kochsalzfreier Betrieb / Online-Priming, automatisches An- und Ablegen mit D-FAS			
AV18AFA-P	143	für HD, OHDF, OHF, Bolus	28
AV18AFA-SNP	202	für Single-Needle-HD, Bolus	22
AV18AFA-PL	159	mit 50 cm längerer Patientenleitung für HD, OHDF, OHF, Bolus	26
AV18AFD-P	132	nur für HD, Bolus	28

Substitutionsleitung		
C18AFA-P	für OHDF, OHF	60

Online HDF Set			
AV18AFA-HFP	143	bestehend aus AV-Doppelnadel-System mit Substitutionsleitung C18AFA-P	24

Infusionsleitungen für isotonische Kochsalzlösung		
C18RFB-P	Infusionsleitung mit 2 Luer-Lock-Anschlüssen	60
C18RFC-P	Infusionsleitung mit 1 Luer-Lock-Anschluss und 1 Anstechdorn	60

Zubehör		
C18SFD-P	Zirkulationsverbindungsstück	50
C18BDD-P****	Probenentnahme-Adapter	60

**** enthält Phthalate



Inherited reliability

Kontakt

Telefon +49 40 414629 - 0
info@nikkisomedical.eu

www.nikkisomedical.eu



NIKKISO CO., LTD.
20-3, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku
Tokyo 150-6022, Japan

Telefon: +81-3-3443-3727

Telefax: +81-3-3440-0681

Internet: www.nikkiso.com

EC REP



NIKKISO Medical Europe GmbH
Kapstadtring 7
D-22297 Hamburg

Telefon: +49 40 414629 - 0

Telefax: +49 40 414629 - 49

E-Mail: info@nikkisomedical.eu

NIKKISO Medical Europe GmbH
Kapstadtring 7
D-22297 Hamburg

Telefon: +49 40 414629 - 0

Telefax: +49 40 414629 - 49

E-Mail: info@nikkisomedical.eu