


AV18 & C18 Serien

Blutschlauchsysteme für
die Hämodialyse (dampfsterilisiert)

Original NIKKISO Blutschlauchsysteme für Ihre **DBB-EXA**



Vorteile der AV 18 Serie

- DEHP-frei
- Umweltfreundliche sichere Dampfsterilisation
- Geringes extrakorporales Blutvolumen
- Reduzierte Blut/Luftkontaktfläche
- Geringer Vorbereitungsaufwand
- Einsparung des Abflussbeutels
- Automatisches Spülen, An- und Ablegen in Verbindung mit der  Funktion der DBB-EXA



DBB-EXA


AV18 & C18 Serien

Die AV18 & C18 Serien sind an die D-FAS* Funktionen der NIKKISO DBB-EXA optimal angepasst, um eine größtmögliche Arbeitserleichterung zu erreichen.

Die originalen NIKKISO Blutschlauchsysteme bieten, durch höchstmögliche Qualitäts- und Fertigungsstandards, die bestmögliche Auflösung und Genauigkeit beim Einsatz der optischen Messverfahren für die Blutvolumenmessung und die Rezirkulationsratenmessung von Gefäßzugängen.


Die Kombination von DEHP-freiem PVC-Material und der prozessüberwachten Dampfsterilisation, gemäß EN ISO 17665-1:2006, ist die beste Wahl für Biokompatibilität und sichere Pyrogen-Freiheit.

*Dialysis Full Assist System

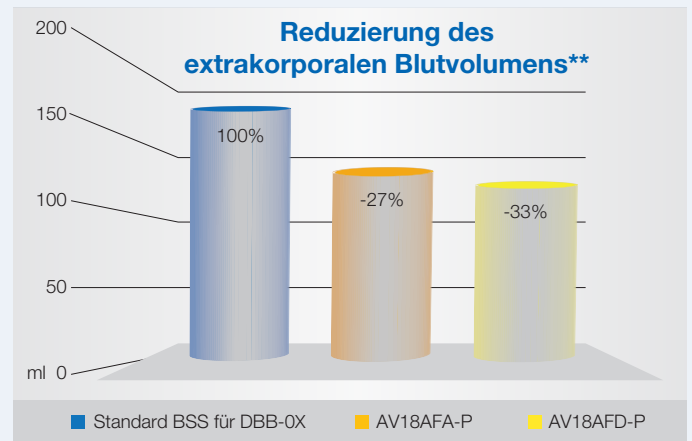

** basierend auf Herstellerangaben

Das verkleinerte extrakorporale Blutvolumen reduziert die Blut / Luftkontaktfläche.

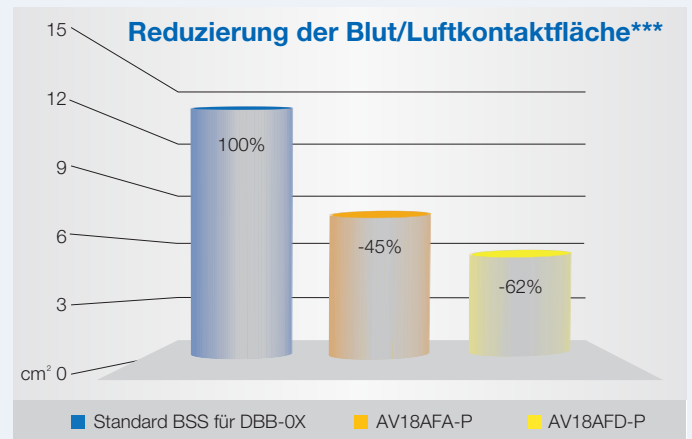

*** basierend auf arithmetischen Berechnungen

NIKKISO bietet eine breite Auswahl an Blutschlauchsystemen, die die Anforderungen des Pflegepersonals und die Gegebenheiten in den Dialysezentren berücksichtigen (z. B. AV18AFA-PL mit verlängerter Patientenleitung).

Das AV18AFA-P mit HDF Prä- und Postdilutionanschlüssen kann zusammen mit dem C18RFB-P (mit Luer-Lock) oder mit dem C18RFC-P (mit Luer-Lock und Anstechdorn) beim Spülen, An- und Ablegen mit **Kochsalzlösung** eingesetzt werden.

Online-HDF Set


Das praktische und ökonomische Set AV18AFA-HFP für die Online-HDF Behandlung besteht aus einem Doppelnadel-System und einer Substitutionsleitung.

HD Set


Das AV18AFD-P ohne Dialysator-Eingangsdruckkammer (kleinere Blut / Luftkontaktfläche) wurde speziell für Standard-HD Behandlungen entworfen.

Dampfsterilisierte Blutschlauchsysteme


Original NIKKISO Komponenten

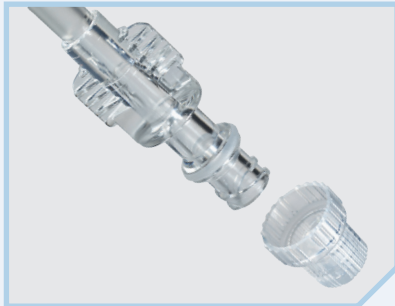


Online-Port-Konnektor, für eine sichere hygienische Konnektierung der Substitutleitung.

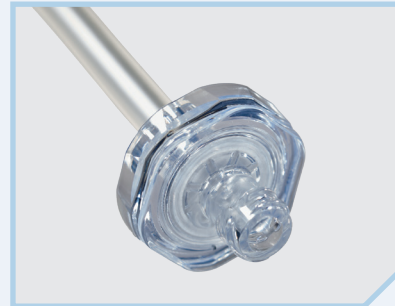

Druckableitfilter mit ergonomischem Gehäuse, für eine einfache und sichere Handhabung.

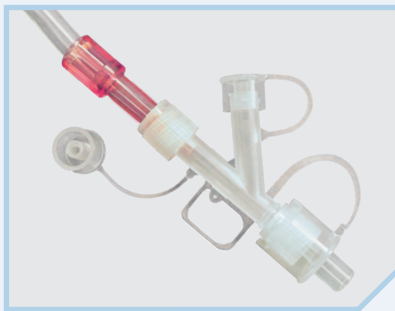

Y-Ansatzstück für D-FAS Spülen. Vollständig verschließbar und somit hygienisch zu handhaben.

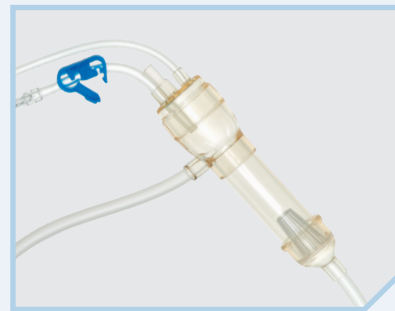

Flussoptimierte venöse Tropfkammer mit verbesserter Anströmung und höherer Luftabscheidung.

Sterilisationsverfahren

Dampfsterilisation (EN ISO 17665-1:2006)

Mindesthaltbarkeit

36 Monate

Therapieverfahren

HD, HF, HDF (Post/Prädilution), Doppelnadel-Dialyse, Single-Needle-Dialyse

Blutschlauchsysteme

Modell	Füllvolumen Blut (ml)	Beschreibung	VE
Kochsalzfreier Betrieb / Online-Priming, automatisches An- und Ablegen mit D-FAS			
AV18AFA-P	143	für HD, OHDF, OHF, Bolus	28
AV18AFA-SNP	202	für Single-Needle-HD, Bolus	22
AV18AFA-PL	159	mit 50 cm längerer Patientenleitung für HD, OHDF, OHF, Bolus	26
AV18AFD-P	132	nur für HD, Bolus	28

Substitutionsleitung

C18AFA-P		für Online HDF, OHF	60
----------	--	---------------------	----

Online HDF Set

AV18FA-HFP	143	bestehend aus AV-Doppelnadel-System mit Substitutionsleitung C18AFA-P	24
------------	-----	---	----

Infusionsleitungen für isotonische Kochsalzlösung

C18RFB-P		Infusionsleitung mit 2 Luer-Lock-Anschlüssen	60
C18RFC-P		Infusionsleitung mit 1 Luer-Lock-Anschluss und 1 Anstechdorn	60

Zubehör

C18BDD-P****		Probenentnahme-Adapter	60
--------------	--	------------------------	----

****enthält Phthalate



Inherited reliability

Kontakt

Telefon +49 40 414629 - 0
info@nikkiso-europe.eu

Hersteller
NIKKISO CO., LTD.

20-3, Ebisu 4-Chome, Shibuya-ku
Tokyo 150-6022, Japan

Telefon: +81-3-3443-3727
Telefax: +81-3-3440-0681
Internet: www.nikkiso.com

EU-Bevollmächtigter
NIKKISO Europe GmbH

Desbrocksriede 1
D-30855 Langenhagen

Telefon: +49 511 679999 - 0
Telefax: +49 511 679999 - 11
E-Mail: info@nikkiso-europe.eu
Internet: www.nikkiso-europe.eu

Exklusivvertrieb durch
NIKKISO Europe GmbH

Kapstadtring 7
D-22297 Hamburg

Telefon: +49 40 - 414629 - 0
Telefax: +49 40 - 414629 - 49
E-Mail: info@nikkiso-europe.eu
Internet: www.nikkiso-europe.eu